



MEDI-BAG (OHNE GRIFF)

Einfache & sichere Bergung von Gewebe- & Organteilen

Medi-Bag in der Ausführung ohne Griff ist besonders einfach anzuwenden. Der Gewebe-Bergebeutel wird über den Pusher durch die Einführhülse in das Abdomen geschoben und weitet sich nach dem Abwurf sekundenschnell. Das Schließen erfolgt über eine Fasszange. Nach Entfernen des Pushers kann die Einführhülse für weitere Instrumente genutzt werden.



AUTOMATISCHES, WEITES ÖFFNEN

Durch den Nitinoldraht mit Memory-Effekt öffnet sich der Bergebeutel von selbst



EINFÜHRHÜLSE MIT PUSHER-GRIFF

Schont das Gewebe, da hoch formstabil und extrem glatte Oberfläche



HOHER BEDIENUNGSKOMFORT

Der Gewebe-Bergebeutel lässt sich durch einfaches Schieben des Pushers abwerfen




VISUELLE KONTROLLE

Im reißfesten, flüssigkeitsdichten und transparenten Bergebeutel aus TPU-Material ist der Inhalt klar sichtbar



STERILE EO

Artikelnummer	Beutel-Volumen	Beutel-Durchmesser	Trokar-Durchmesser	VE
ME900234	200 ml	50 mm	10 mm	10
ME900235	400 ml	90 mm	10 mm	10
ME900236	800 ml	100 mm	10 mm	10

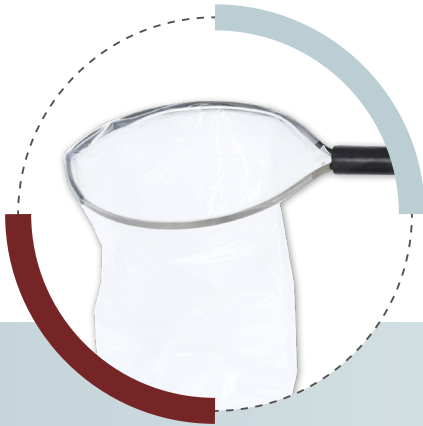

MEDI-BAG GRIP (ABWERFBAR MIT GRIFF)

Einfache & sichere Bergung von Gewebe- & Organteilen

MEDI-BAG GRIP unterstützt das stufenlose intraoperative Öffnen und Schließen des Gewebe-Bergebeutels im Abdomen. Die Steuerung erfolgt über den Pusher-Griff, der den selbst-öffnenden Gewebe-Bergebeutel durch die Öffnung der Einführhülse schiebt. Der Gewebe-Bergebeutel wird durch Ziehen des Pusher-Griffs und Fadens sicher verschlossen.



AUTOMATISCHES, WEITES ÖFFNEN

Durch den Nitinoldraht mit Memory-Effekt öffnet sich der Bergebeutel von selbst



EINFÜHRHÜLSE MIT PUSHER-GRIFF

Schont das Gewebe, da hoch formstabil und extrem glatte Oberfläche



HOHER BEDIENUNGSKOMFORT

Ergonomischer Griff bietet hohen Bedienungskomfort durch das stufenlose Öffnen und Schließen des Beutels




SICHERER VERSCHLUSS

Durch Ziehen des Fingerrings wird der Bergebeutel nach Gewebeentnahme sicher durch einen Faden verschlossen



VISUELLE KONTROLLE

Im reißfesten, flüssigkeitsdichten und transparenten Beutel aus TPU-Material ist der Inhalt klar sichtbar

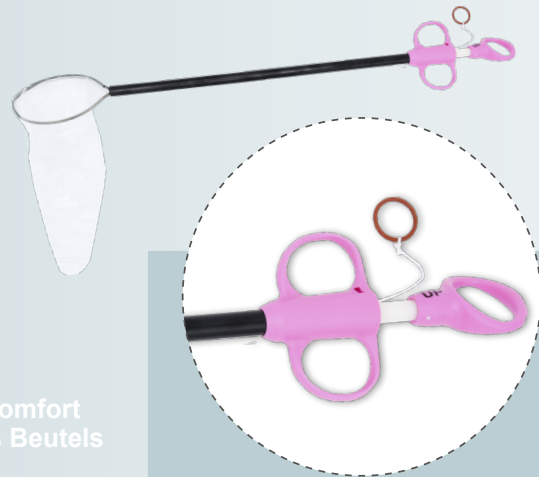

FARBCODE GRIFF

Für schnelle Orientierung bei der Wahl des Beutel-Volumens



STERILE EO

Artikelnummer	Beutel-Volumen	Beutel-Durchmesser	Trokar-Durchmesser	VE
ME900238	200 ml	80 mm	10 mm	5
ME900230	500 ml	100 mm	10 mm	5
ME900231	800 ml	130 mm	10 mm	5
ME900232	1200 ml	130 mm	10 mm	5
ME900233	1500 ml	130 mm	10 mm	5

Zahlungsbedingungen & Lieferkosten wie vereinbart! Es gelten die AGB der medika Medizintechnik GmbH, abrufbar unter www.medika.de/agb

medika Medizintechnik GmbH | Südring 84 | 95032 Hof | Tel: +49 9281 7549 0 | Fax: +49 9281 7549 67 | info@medika.de | www.medika.de